
### Smart Hand Hygiene System

# หน้าเข้าสู่ระบบ (Log in)

-ผู้ใช้งานระบบ จะต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Log in) เพื่อมาใช้งาน Smart Hand Hygiene System

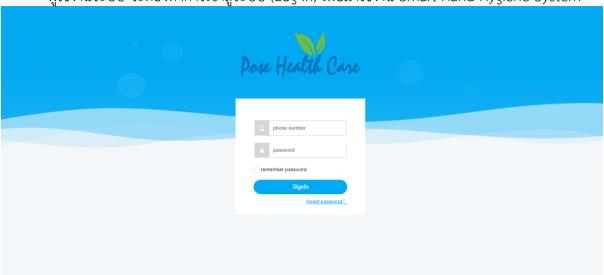

ทำการเข้าสู่ระบบ (Log in) โดยกรอกตามรายละเอียดที่กำหนด คือ

- phone number : หมายเลขโทรศัพท์

- password : รหัสผ่าน

จากนั้น กดปุ่ม Sign in เป็นการลงชื่อเข้าใช้ในระบบ

โดนมีฟังก์ชั่นเสริม คือ

- remember password : การจดจำหมายเลขโทรศัพท์ และรหัสผ่าน เพื่อเข้า Log in ในครั้งถัดไป โดยไม่ต้องกรอกใหม่

#### หน้าแรก

#### เมนู Data overview

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเสร็จ จะปรากฏหน้าจอตามดังรูปภาพ



- 1. แถบเมนูหลัก ซึ่งมี 6 เมนูหลัก ประกอบด้วย
- Data overview
- Device User
- Message
- Examine
- Admin

- 2. จำนวนเครื่องที่มีทั้งหมด
- 3. จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
- 4. การล้างมือทั้งหมดของเมื่อวานนี้
- 5. จำนวนผู้ใช้ล้างมือเมื่อวานนี้

แสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟ คือ

- จำนวนผู้ใช้ที่ล้างมือทั้งหมด
- จำนวนล้างมือทั้งหมด

แสดงข้อมูลวันที่ และจำนวนของผู้ใช้กับ การล้างมือทั้งหมด

- \* การเลือกดูข้อมูลของกราฟมีทั้งแบบ รายสัปดาห์ และเดือน
- 6. การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (ปุ่ม Export data)

export wash hand data


departme select department 
period select period 
cancel confirm

Department : เลือก แผนก ที่ต้องการดูข้อมูล

Period : เลือก ระยะเวลา ที่ต้องการดูข้อมูล ได้แก่ 7, 30, 90, 180 และ 365 วัน จากนั้นกด ปุ่ม Confirm เพื่อ ตกลง หรือกดปุ่ม cancel เพื่อ ยกเลิก

#### เมนู Device

เป็นการแสดงข้อมูลของเครื่อง Dispenser ทั้งหมด สามารถแก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลของเครื่อง

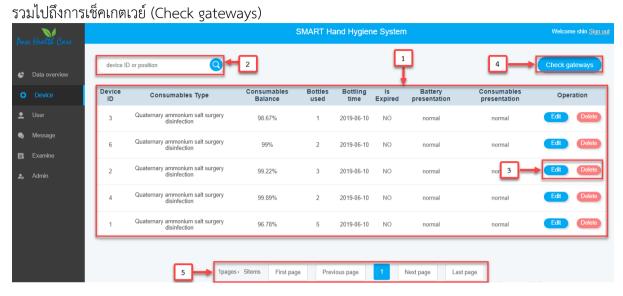


- 1. แสดงข้อมูลของเครื่อง Dispenser
- 2. การค้นหาข้อมูลของอุปกรณ์
- 3. ปุ่ม Edit และปุ่ม Delete
- 4. ปุ่มเช็คเกตเวย์ (Check gateways)
- 5. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

หมายเหตุ : เกตเวย์ (Gateway) เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน เช่น การใช้ เกตเวย์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย

## 1. แสดงข้อมูลของเครื่อง Dispenser


แสดงข้อมูลทั้งหมดของเครื่อง Dispenser ที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วย รหัสอุปกรณ์, ชื่อ โรงพยาบาล, ประเภทของน้ำยา, ปริมาณของน้ำยา, จำนวนขวดที่ใช้ไป, เวลาบรรจุขวด, หมดอายุ, ปริมาณ แบตเตอรี่, วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยา และการจัดการข้อมูลของอุปกรณ์

1.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของเครื่อง Dispenser โดยทำการคลิกที่ รหัสของเครื่อง จะปรากฏ ข้อมูลขึ้นมาดังรูป ประกอบด้วย แผนก, วันที่, ตำแหน่ง และผู้อำนวยการ

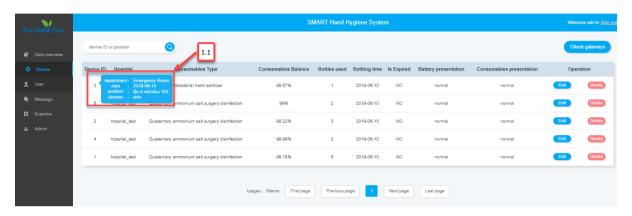

# 2. การค้นหาข้อมูลของอุปกรณ์

- 2.1 ทำการพิมพ์รหัสเครื่อง หรือตำแหน่งที่ตั้งอยู่ของอุปกรณ์ที่ต้องการค้นหา
- 2.2 จะแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต้องการ ตามรูปภาพ

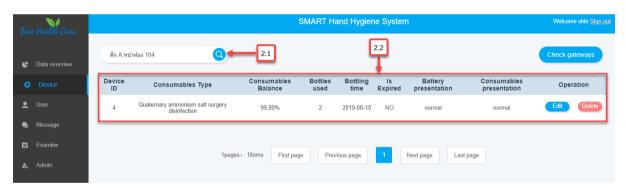

### 3. ปุ่ม Edit และปุ่ม Delete

### - ปุ่ม Edit

เมื่อคลิกแล้วจะแสดง หน้าจอ Pop – up แก้ไขรายละเอียดอุปกรณ์

6	edit device details	
hospital	hospital_test	▼
department	Emergency Room	
localtion	ตึก A หน้าห้อง 103	
	2019-06-10	
Consumable category	Antibacterial hand sanitize	▼
Equipment	shin	
manager		
can	cel confirm	

- Hospital : เลือกโรงพยาบาล

- Department : ระบุ ชื่อแผนก ที่ต้องการแก้ไข


- Location : ระบุ สถานที่ตั้ง ของเครื่อง Dispenser ที่ต้องการแก้ไข

- Consumable category : เลือกประเภทของน้ำยาที่ต้องการแก้ไข

- Equipment manager : ระบุชื่อ ผุ้จัดการอุปกรณ์ ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม confirm เพื่อบันทึกการแก้ไข หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการแก้ไข

#### - ปุ่ม Delete

เมื่อคลิกแล้วจะแสดง หน้าจอ Pop – up เพื่อยืนยันการลบอุปกรณ์นั้นออกจากระบบ ดังรูป กดปุ่ม confirm เพื่อยืนยัน หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการลบ

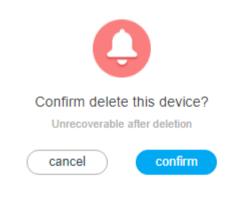


11.

## 4. ปุ่มเช็คเกตเวย์ (Check gateways)

- 4.1 แสดงข้อมูลของเกตเวย์ (Gateway) ประกอบด้วย รหัสเกตเวย์, ชื่อผู้ใช้ของเกตเวย์, รหัสผ่านของ เกตเวย์, ตำแหน่งของเกตเวย์ และสถานะของเกตเวย์
  - 4.2 ปุ่ม Download demo คือ การนำไฟล์ข้อมูลของเกตเวย์มาแก้ไข
  - 4.3 ปุ่ม Import gateway data คือ การนำไฟล์้ที่แก้ไขเสร็จสิ้นมาทำการนำเข้า เพื่ออัพเดทข้อมูล
  - 4.4 ปุ่ม < Return to deviceList การย้อนกลับไปยังหน้ารายการอุปกรณ์



# 5. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

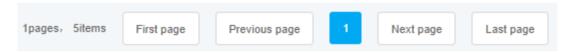

- .....pages, .....items : แสดงจำนวนหน้า และรายการที่มีทั้งหมด

- First page : ไปยังหน้าแรกสุด


- Previous page : ไปยังหน้าก่อนหน้านี้

- 💶 : แสดงเลขที่หน้าปัจจุบัน

- Next page : ไปยังหน้าถัดไป - Last page : ไปยังหน้าสุดท้าย

#### เมนู User

เป็นการแสดงข้อมูลที่ถูกบันทึกการล้างมือจากเครื่อง Dispenser ของผู้ใช้ทั้งหมด โดยสามารถค้นหา จากชื่อ หรือเลขการ์ดของผู้ใช้ สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบ รวมไปถึงการปิดการใช้งานของผู้ใช้

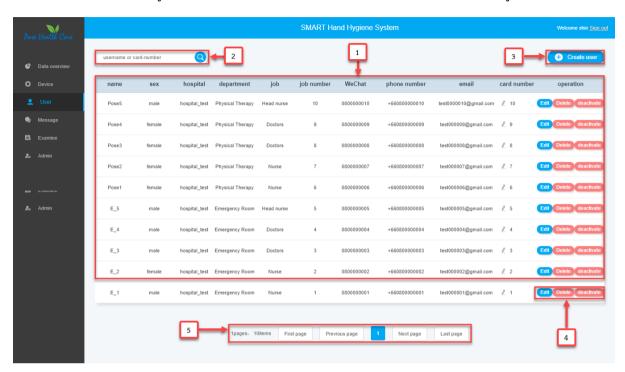


- 1. แสดงข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด
- 2. การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้
- 3. ปุ่ม Create user
- 4. ปุ่ม Edit, Delete และ de activate
- 5. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

## 1. แสดงข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด

หากผู้ใช้ทำการล้างมือจากเครื่อง Dispenser เครื่องจะจับตัวสัญญาณกับการ์ดที่ผู้ใช้มีอยู่ เพื่อทำการ บันทึกข้อมูลการล้างมือของผู้ใช้ โดยจะแสดงข้อมูล ชื่อ, เพศ, ชื่อโรงพยาบาล, ตำแหน่ง, งาน (เช่น แพทย์, พยาบาล), รหัสพนักงาน, หมายเลข WeChat, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ และหมายเลขการ์ด

1.1 เมื่อคลิกไปที่ชื่อของผู้ใช้ จะแสดงข้อมูลผู้ใช้บุคคลนั้นที่ผ่านการล้างมือและถูกบันทึกข้อมูลจาก การ์ดที่มี โดยมีข้อมูลของ ชื่อ, เพศ, หมายเลขการ์ด, รหัสพนักงาน, วันเวลาที่ล้างมือ และหมายเลขอุปกรณ์ที่ ล้างมือ

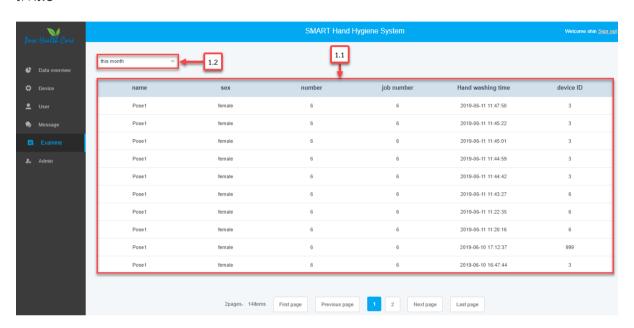

1.2 เป็นการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง โดยระบุเป็น

- this month : เดือนนี้

- last month : เดือนที่แล้ว

- recent 4 month : 4 เดือนล่าสุด

# 2. การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้

- 2.1 ทำการพิมพ์ชื่อ หรือหมายเลขการ์ดของผู้ใช้ที่ต้องการค้นหา
- 2.2 จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ ดังรูปภาพ



# 3. ປຸ່ມ Create user

# เมื่อคลิกแล้วจะแสดง หน้า Pop – up การสร้างผู้ใช้ขึ้นมาใหม่

create user					
name	user name	Wechat	Wechat		
sex	male 🔻	location	•		
hospital	select hospital	phone	phone number		
departme	department	email	email		
job	job	card number	card number		
job num	job num		cancel		

- name : ชื่อของผู้ใช้

- sex : เพศ

- hospital : ชื่อโรงพยาบาล - department : ชื่อแผนก

- job : อาชีพ

- job num : รหัสพนักงาน
- Wechat : หมายเลข Wechat
- location : สถานที่อยู่อาศัย
- phone : หมายเลขโทรศัพท์

- email : อีเมล์

- card number : หมายเลขการ์ด

#### 4. ปุ่ม Edit, Delete และ de activate

### - ปุ่ม Edit


เมื่อคลิกแล้วจะแสดง หน้า Pop – up การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

	edi	t user	
name	Pose1	Wechat	080000006
sex	female	location	Thailand   +66
hospital	hospital_test	phone	080000006
departme	Physical Therapy	email	test000006@gmail.com
job	Nurse	card number	6
job num	6		cancel

ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการของผู้ใช้ กดปุ่ม confirm เพื่อบันทึกการแก้ไข หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการแก้ไข

### - ปุ่ม Delete

เมื่อคลิกแล้วจะแสดง หน้าจอ Pop – up เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้นั้นออกจากระบบ ดังรูป กด ปุ่ม confirm เพื่อยืนยัน หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการลบ

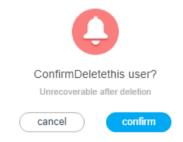


### - ปุ่ม de activate

เมื่อคลิกแล้วจะแสดง หน้าจอ Pop – up เพื่อยืนยันว่า จะปิดการใช้งานของผู้ใช้นั้นออกจาก ระบบ ดังรูป กดปุ่ม confirm เพื่อยืนยัน หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการลบ



# 5. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

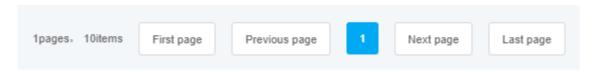

- .....pages, .....items : แสดงจำนวนหน้า และรายการที่มีทั้งหมด


- First page : ไปยังหน้าแรกสุด

- Previous page : ไปยังหน้าก่อนหน้านี้

- : แสดงเลขที่หน้าปัจจุบัน - Next page : ไปยังหน้าถัดไป - Last page : ไปยังหน้าสุดท้าย

#### เมนู Examine

เป็นการแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่จะแสดงจำนวนของการล้างมือตามที่โรงพยาบาลกำหนด มีการเรียกดู ข้อมูลย้อนหลัง รวมทั้งการตั้งเป้าหมายกำหนดจำนวนการล้างมือให้แก่ผู้ใช้

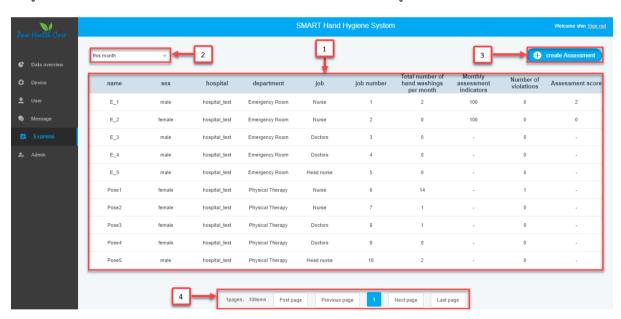

- 1. แสดงข้อมูลจำนวนการล้างมือของผู้ใช้
- 2. การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของผู้ใช้
- 3. ปุ่ม Create Assessment
- 4. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

## 1. แสดงข้อมูลจำนวนการล้างมือของผู้ใช้

name	sex	hospital	department	job	job number	Total number of hand washings per month	Monthly assessment indicators	Number of violations	Assessment score
E_1	male	hospital_test	Emergency Room	Nurse	1	5	100	0	5
E_2	female	hospital_test	Emergency Room	Nurse	2	0	100	0	0
E_3	male	hospital_test	Emergency Room	Doctors	3	0	-	0	-
E_4	male	hospital_test	Emergency Room	Doctors	4	0	-	0	-
E_5	male	hospital_test	Emergency Room	Head nurse	5	0	-	0	-
Pose1	female	hospital_test	Physical Therapy	Nurse	6	14	-	1	-
Pose2	female	hospital_test	Physical Therapy	Nurse	7	1	-	0	-
Pose3	female	hospital_test	Physical Therapy	Doctors	8	1	-	0	-
Pose4	female	hospital_test	Physical Therapy	Doctors	9	0	-	0	-
Pose5	male	hospital_test	Physical Therapy	Head nurse	10	2	-	0	-

แสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ล้างมือไปแล้วทั้งหมด ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่โรงพยาบาลกำหนด ไว้ โดยข้อมูลที่ถูกนำมาแสดงจะประกอบด้วย ชื่อ, เพศ, ชื่อโรงพยาบาล, ชื่อแผนก, อาชีพ, รหัสพนักงาน, จำนวนการล้างมือรวมต่อเดือน, ตัวชี้วัดการการประเมินรายเดือน, จำนวนที่ไม่ล้างมือ และการประเมิน

# 2. การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของผู้ใช้

การดูข้อมูลย้อนหลัง สามารถทำได้จากการคลิกเลือกที่ชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการดูประวัติการล้าง มือย้อนหลัง โดยมีระยะเวลาให้เลือกดูเป็นแบบรายเดือน เช่น เดือนนี้ เดือนที่แล้ว และ 4 เดือนล่าสุด

### 3. ปุ่ม Create Assessment


เมื่อคลิกจะแสดง หน้า Pop – up การสร้างเป้าหมายการประเมิน

С	reate Assessment target	
departme	department	
job	job	
target	Assessment target	
coefficien	coefficient	
	cancel	

- department : ระบุ แผนก

- job : งาน (เช่น แพทย์, พยาบาล)
 - target : ป้าหมายการประเมิน
 - coefficient : ค่าสัมประสิทธิ์

# 4. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

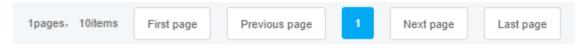

- .....pages, .....items : แสดงจำนวนหน้า และรายการที่มีทั้งหมด

- First page : ไปยังหน้าแรกสุด


- Previous page : ไปยังหน้าก่อนหน้านี้

- 💶 : แสดงเลขที่หน้าปัจจุบัน

- Next page : ไปยังหน้าถัดไป - Last page : ไปยังหน้าสุดท้าย

### เมนู Admin

เป็นหน้าเมนูการจัดการแอดมินกับระบบ เมื่อคลิกแถบ Admin จะปรากฏรายชื่อของแอดมิน ดังรูป

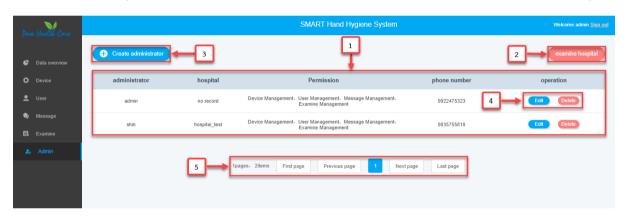

- 1. แสดงข้อมูลของแอดมิน
- 2. ปุ่ม examine hospital
- 3. ปุ่ม Create administrator
- 4. ปุ่ม Edit และปุ่ม Delete
- 5. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

### 1. แสดงข้อมูลของแอดมิน

เมื่อคลิกเลือกที่เมนู Admin จะมีข้อมูลของแอดมินปรากฏขึ้นมา ประกอบด้วย ชื่อของแอด มิน, ชื่อโรงพยาบาล, ระดับสิทธิ์ในการอนุญาต, หมายเลขโทรศัพท์ และการจัดการข้อมูล ดังภาพ




### 2. ปุ่ม examine hospital

เมื่อคลิก ปุ่ม examine hospital จะมายังหน้าข้อมูลของโรงพยาล และสามารถจัดการ ข้อมูลในรายการนั้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มชื่อโรงพยาบาลเข้าไปได้



- 2.1 เป็นการแสดงข้อมูลของโรงพยาบาล โดยมี รหัสของโรงพยาบาล และชื่อโรงพยาบาล
- 2.2 ปุ่ม create hospital (การสร้างชื่อโรงพยาบาล)

เมื่อคลิกจะแสดงหน้า Pop – up เพื่อสร้างชื่อโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่

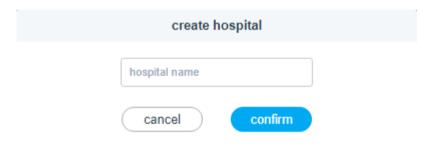


- hospital name : ระบุ ชื่อโรงพยาบาล ที่ต้องการสร้าง

\* hospital ID : รหัสของโรงพยาบาล จะรันให้เองอัตโนมัติ หากมีการสร้างข้อมูลใหม่ จากนั้นกดปุ่ม confirm เพื่อบันทึกการสร้างข้อมูล และกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิก

#### 2.3 ปุ่ม Delete


เมื่อคลิกจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันว่าต้องการลบข้อมูล

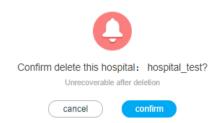

กดปุ่ม confirm เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิก 2.4 ปุ่ม < return to admin เมื่อคลิกแล้ว จะย้อนกลับไปยังหน้าที่แสดงข้อมูลของแอดมิน

#### 3. ปุ่ม Create administrator

เมื่อคลิกจะแสดงหน้า Pop - up เพื่อเพิ่มแอดมินขึ้นมา

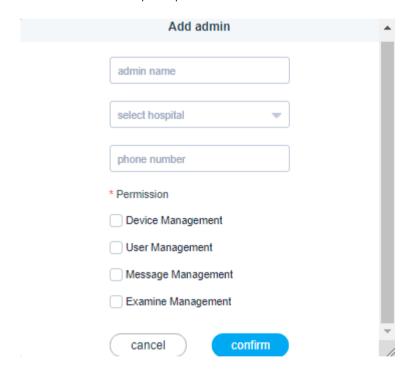

- Admin name : ชื่อของแอดมิน ที่ต้องการสร้าง

- select hospital : เลือกโรงพยาบาล ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยปุ่ม create hospital

- phone number : หมายเลขโทรศัพท์

\*Permission (ระดับสิทธิ์การใช้งาน)

- Device Management : การจัดการอุปกรณ์

- User Management : การจัดการผู้ใช้

- Message Management : การจัดการข้อความ

- Examine Management : การจัดการ การตรวจสอบ กดปุ่ม confirm เพื่อบันทึกการสร้างแอดมิน หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิก

### 4. ปุ่ม Edit และปุ่ม Delete


- ปุ่ม Edit

เมื่อคลิกจะแสดงหน้า Pop – up การแก้ไขข้อมูลของแอดมิน

Admin edit	Î
admin	
hospital	
0922475323	
* update permission	
Device Management	
User Management	
Message Management	
Examine Management	
cancel confirm	¥

เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น กดปุ่ม confirm เพื่อทำการบันทึก หรือกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิก

# 5. แสดงข้อมูลจำนวนหน้า และจำนวนรายการทั้งหมด

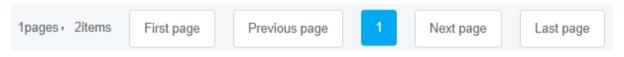

- .....pages, .....items : แสดงจำนวนหน้า และรายการที่มีทั้งหมด
- First page : ไปยังหน้าแรกสุด
- Previous page : ไปยังหน้าก่อนหน้านี้
- 💶 : แสดงเลขที่หน้าปัจจุบัน
- Next page : ไปยังหน้าถัดไป
- Last page : ไปยังหน้าสุดท้าย